

**Your
German
Manufacturer**



MS WESTFALIA GmbH
est.1995

Косметологическое оборудование



**Made in
Germany**




Оборудование производства MS Westfalia GmbH:

Чистые помещения • Рентгеновское оборудование • ЛОР-оборудование
Оборудование для анестезиологии и интенсивной терапии • Медицинские светильники • Функциональная диагностика
Офтальмологическое оборудование • Микроскопы и кольпоскопы • Электрохирургия • Литотриптеры
Косметологическое и SPA-оборудование • Физиотерапевтическое оборудование • Домашние фотозпиляторы

Diona Slim Line

Передовая кавитационная система моделирования контуров тела: лечения локальных жировых отложений и целлюлита

- Безопасная и эффективная альтернатива хирургической липосакции.
- Технология селективного воздействия на локальные жировые отложения и эффективного разрушения жировых клеток.
- Две рукоятки в одном аппарате:
 - Кавитационная рукоятка «Ультразвук + Вакуум».
 - Лимфодренажная рукоятка «Вакуумный Массаж».
- Первый аппарат для ультразвуковой кавитации с интегрированным вакуумным насосом и двумя УЗ-излучателями в одной рукоятке.

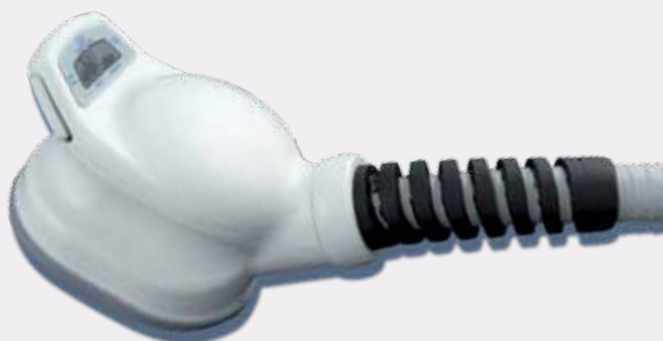

Кавитационная рукоятка «Ультразвук + Вакуум»



Лимфодренажная рукоятка «Вакуумный Массаж» для работы по лицу



Лимфодренажная рукоятка «Вакуумный Массаж» для работы по телу



Кавитационная рукоятка «УЗ + Вакуум»

- Вакуумный насос захватывает и приподнимает жировую ткань так, чтобы она плотно прилегала к рукоятке и действие ультразвука было направлено только на обрабатываемую область.
- Генератор УЗ-импульсов с двумя излучателями, расположенными друг к другу под углом 135°, создают два направления пересекающихся ультразвуковых волн, обеспечивая фокусированное, глубокое и эффективное воздействие на подкожно-жировые ткани обрабатываемой области.



- Сочетание вакуума и ультразвука в одной рукоятке обеспечивает эффективное, безопасное и комфортное воздействие на обрабатываемую зону.
- **Действие:** разрушение адипоцитов, активизация обменных процессов, уменьшение количества подкожного жира (толщины жировой прослойки).



Лимфодренажная рукоятка «Вакуумный Массаж»

- Насадка для работы по телу.
- Насадка с мембраной для работы по лицу.
- Рукоятка предназначена для помпажа, «открытия» лимфатических узлов и проведения их вакуумного массажа.
- **Действие:** усиление циркуляции лимфы, венозной и артериальной крови, активизация метаболизма тканей.
- **Преимущества аппарата:**
 - Сочетание кавитационной и лимфодренажной рукояток в одном аппарате.
 - Сочетание двух УЗ-излучателей и вакуумного насоса в одной кавитационной рукоятке.
 - Неинвазивность, безопасность и безболезненность процедуры.
 - Высокая эффективность при небольшом количестве сеансов.
 - Эффективная и стойкая элиминация жировых клеток.
 - Получение видимого результата сразу после процедуры.
 - Отсутствие периода реабилитации после процедуры.
 - Отсутствие побочных и негативных визуальных эффектов.
 - Простота в использовании.
- Обрабатываемая площадь за сеанс: 15x15 см.
- Области обработки: плечи, спина, живот, ягодицы, бедра, колени, голени.
- Длительность процедуры: до 60 минут.
- Курс: 6-10 процедур.
- Интервал: 7-10 дней.

Diona Dia B

Аппарат для диагностики тела

- Современный подход к определению проблемы комплексной коррекции фигуры и избыточного веса требует научно обоснованных методов диагностики тела пациента, контроля результата и объективной оценки эффективности процедур.
- Diona Dia B - это комбинированная технология диагностики с использованием ультразвуковых волн и импедансометрии, направленная на определение импеданса тканей, толщины жирового слоя, «свободной» жидкости в организме.
- Результаты диагностики распечатываются на термобумаге через 1 минуту. Данные диагностики используются специалистом для определения курса процедур, необходимых для конкретного пациента. Преимуществами аппарата являются точность, надежность и быстрота.




Диагностика тела на аппарате Diona Dia B включает 11 параметров:

- Общее содержание воды.
- Отеки.
- Дегидратация.
- Масса мышечной ткани.
- Жир.
- Целлюлит.
- Психофизическое напряжение.
- Клеточный метаболизм.
- Основной обмен.
- Индекс массы тела.
- Процентное соотношение жировой и безжировой массы тела.

Diona Press Аппарат для прессотерапии

- Процедура лимфодренажа обязательно дополняет основную процедуру обработки жировой ткани аппаратом Diona Slim Line. Прессотерапия - это одна из разновидностей лимфодренажа.
- Принцип работы аппарата Diona Press состоит в последовательной, автоматически контролируемой подаче сжатого воздуха в специальные герметичные манжеты, разделенные на секции. Работа прибора имитирует мышечные сокращения. Быстрое закачивание манжет сжатым воздухом создает равномерное сдавливание кожи и подлежащих тканей. Волнообразные движения, создаваемые давлением воздуха, способствуют улучшению лимфо- и кровотока путем массажа от периферии.
- **Действие:** выведение жидкости, выведение продуктов распада жировых клеток через лимфатическую и кровеносную системы, активизация процесса избавления от остаточного жира, уменьшение толщины жировых слоев на обработанных участках, подтягивание и выравнивание кожи.

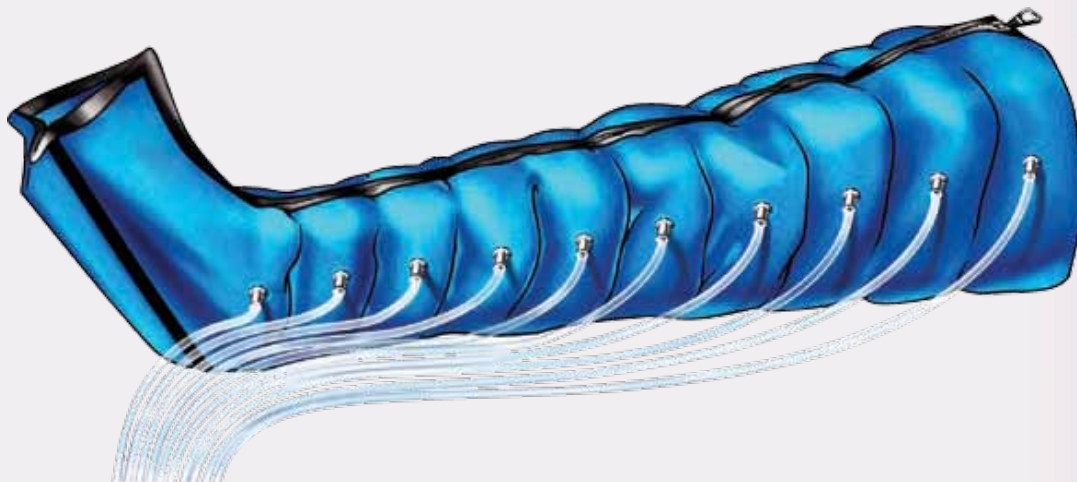

Стандартный комплект аксессуаров:

- 10-камерные манжеты для нижних конечностей (левая и правая);
- 2-камерная манжета для живота.
- Регулировка давления: 20 -160 мм.
- Компрессор: бесшумный и надежный.
- Количество программ: 8.



EWATage

Новейшая технология безоперационной липосакции с использованием ударно-волновой терапии

Безоперационная липосакция – эффективный метод удаления нежелательных жировых отложений и лечения целлюлита без хирургического вмешательства. Высокая эффективность процедур сравнима с классической липосакцией и обладает рядом преимуществ.

- **Преимущества технологии EWATage:**

- Методика без хирургического вмешательства: отсутствие швов, гематом, отеков.
- Безопасность: отсутствие осложнений.
- Отсутствие реабилитационного периода.
- Эффект сохраняется до года.
- Лечение безопасно и безболезненно.
- Видимый результат после первой процедуры.

- **Принцип действия:**

- Под воздействием ударной волны в тканях организма происходит ряд изменений: рассасывание фиброзных перегородок, улучшение капиллярного кровоснабжения, увеличение скорости лимфотока, улучшение метаболических процессов в тканях.
- В результате этих процессов гипертрофированные адипоциты начинают уменьшаться, что приводит к снижению объема жировых отложений.
- Одновременно происходит стимуляция фибробластов с увеличением выработки коллагена, что способствует повышению тургора тканей.

- **Области применения:**

- Косметология: коррекция фигуры, лечение целлюлита, лифтинг.
- Ортопедия: боли в мышцах, суставах и в местах переломов, пяточная шпора и т.п.



EWATage Extra

EWATage Premia

- Аппарат EWATage Premia предназначен для лечения целлюлита, коррекции контуров тела, укрепления мышечной и соединительной ткани. Глубина проникновения ударной волны используемого аппликатора составляет 50 мм.



- Опция: новый уникальный аппликатор для вибротерапии. Предназначен для вибростимуляции мышечной ткани на частотах 1-35 Гц. Вибростимуляция является отличным дополнением к ударно-волновой терапии в лечении целлюлита, застойных явлений, мышечных спазмов. Улучшает циркуляцию крови и лимфы во внеклеточном матриксе соединительной ткани и стимулирует метаболическую активность.

- **Результаты лечения:**

- Уменьшение объемов.
- Лечение целлюлита.
- Увеличение упругости кожи.



EWATage Premia

EWATage Extra и Superia

Аппараты EWATage Extra и EWATage Superia имеют:



- Аппликатор фокусированных ударных волн. Предназначен для лечения «глубоких» проблем, укрепления соединительной ткани и лифтинга.

- Аппликатор нефокусированных волн для терапии поверхностных изменений кожи, стимулирует метаболическую активность клеток кожи.



- Опционально поставляется аппликатор для вибротерапии.



EWATage Superia

- **Эффективность:**
 - Эффект становится заметен после первых процедур, имеет нарастающий эффект и продолжается после завершения курса. Курс состоит из 6-10 сеансов, которые проводят в течение 4-6 недель.
- **Преимущества:**
 - Эффективная терапия для поверхностных и глубоко расположенных зон лечения.
 - Высокий уровень эргономики и простоты управления.
 - Разнообразные цветовые решения исполнения корпуса.
 - Два варианта исполнения:
 - Отдельностоящий EWATage Extra.
 - Настольный EWATage Superia.
- **Преимущества метода ударно-волновой терапии EWATage:**
 - Видимый результат после первой процедуры.
 - Расщепление и выведение жиров происходит естественным путем, не нарушая общего обмена веществ.
 - Не нарушается кожный покров.
 - Лечение безопасно и безболезненно.
 - Отсутствие реабилитационного периода.
 - Отсутствие осложнений: фиброз, рубцевание, гематомы, развитие инфекций.



Diona

Физиотерапевтический комплекс

Комплекс Diona используется в физиотерапии, в эстетической медицине и косметологии.

Diona - многофункциональная установка, включающая:

1. **Ультразвук:** 1 МГц, 3 МГц (импульсный и непрерывный режимы).
 2. **Электротерапию:** интерференционные токи, токи средней частоты, токи низкой частоты, электродиагностику.
 3. **Вакуумную терапию.**
- Широкий перечень показаний позволяет осуществлять эффективное лечение, используя для этого ультразвук, ток и вакуум.
 - Память на индивидуальные программы 1000 пациентов. Наиболее часто используемые программы лечения легко записываются и вызываются.
 - Два ультразвуковых излучателя 4 см² и 1 см² работают на частотах 1 и 3 МГц. Эргономичные излучатели из высококачественной стали обеспечивают максимально возможную безопасность на ультразвуковом выходе.
 - Вакуум в пределах от -0,05 до -0,75 бар, 20 ступенчатый контроль.
 - Аппарат представляет собой стойку с большим сенсорным дисплеем.
 - Размеры стойки: 430x450x1100 мм.
 - Программы на трех языках – русском, английском и немецком.
 - Карта пациентов, библиотека, возможность выбора индивидуальной программы.



Использование аппарата Diona в эстетической медицине

- Патогенез целлюлита складывается из трех основных процессов – локальной гипертрофии адипоцитов, нарушения микроциркуляции в жировой ткани и фиброза. Меры, направленные на предупреждение и лечение целлюлита, призваны стимулировать расщепление жиров в адипоцитах, снижать интенсивность липогенеза, активизировать крово- и лимфообращение в жировой ткани, устранять застойные явления и повышать тонус сосудов.
- **Лечение с применением стойки Diona:**
 - Позволяет удалить застойные явления, обеспечить лимфодренаж, способствует выведению лишней жидкости из подкожной жировой клетчатки.
 - Оказывает дефибролизующее действие, устраняет фиброзы.
 - Стимулирует липолиз: во время процедуры происходит интенсивное расщепление триглицеридов, выведение продуктов расщепления и уменьшение общей жировой массы.
 - Улучшает микроциркуляцию, регенерацию и трофику тканей.
 - Активизирует вывод токсинов из тканей, вывод продуктов метаболизма.
 - Способствует стимуляции фибробластов: фибробласты активизируют синтез компонентов межклеточного матрикса дермального слоя (коллагена, эластина) и инициируют процессы неоколлагенеза, что приводит к повышению тургора тканей и улучшению их эластичности.

SPA и Wellness оборудование от MS Westfalia GmbH

Гидромассажная ванна Calipso PACIFIC

- Эргономичная форма ванны со специальным суппортом для ног и встроенными поручнями. Ванна работает с пресной и морской водой.
- **Характеристики:**
 - Массаж по 2 зонам.
 - Автоматические водно-воздушные интервалы.
 - 60 форсунок для воды и воздуха.
 - Регулируемое давление воздуха и воды.
 - Автоматический спуск воды.
 - Вибрационный гидромассаж с возможностью добавления ароматических и других добавок.
 - Ароматерапия и ингаляция.



Гидромассажная ванна Calipso PREMIA

- Ванна изготовлена по форме тела, имеет выступы для рук для процедур в полулежащем положении.
- **Характеристики:**
 - Массаж по 5 зонам.
 - 6 стандартных программ и возможность индивидуального программирования - выключение массажа отдельных зон, выбор времени массажа по отдельным зонам, включение всех зон массажа одновременно.
 - 144 форсунки для воды и воздуха.
 - Вибрационный гидромассаж с возможностью добавления ароматических и других добавок в мелкодисперсном виде.
 - Ароматерапия и ингаляция.



Гидромассажная ванна Calipso EXTRA

- Специальная анатомическая форма ванны с углублениями для рук. Ванна работает с пресной и морской водой.
- Вода и воздух сведены в одной системе каналов, благодаря чему возможен вибрационный массаж и перемешивание ароматических добавок. Общий и зональный массаж с ароматерапией и ингаляцией.
- **Характеристики:**
 - Массаж тела по 8 зонам.
 - 7 программ и возможность индивидуального программирования: включение и выключение массажа отдельных зон, выбор времени массажа по отдельным зонам, включение всех зон массажа одновременно.
 - 172 форсунки для воды и воздуха.
 - Регулируемое давление воздуха и воды.
 - Автоматическое наполнение и спуск воды.
 - Встроенная система цветотерапии. 80 светодиодов с системой подводной подсветки: 4 цвета - белый, синий, красный, зеленый, автоматическое изменение цвета каждые 15 секунд.



Гидромассажная ванна Calipso LUXURY

- Топовая модель серии Calipso.
- Эргономичная форма ванны со специальным суппортом для ног и встроенными поручнями.
- Ванна работает с пресной и морской водой.
- **Характеристики:**
 - Массаж тела по 8 зонам.
 - 16 стандартных программ и возможность индивидуального программирования - включение и выключение массажа отдельных зон, выбор времени массажа по отдельным зонам, включение всех зон массажа одновременно.
 - 252 форсунки для воды и воздуха.
 - Автоматическое наполнение и спуск воды.
 - Встроенная система цветотерапии. 80 светодиодов с системой подводной подсветки: 4 цвета - белый, синий, красный, зеленый, автоматическое изменение цвета каждые 15 секунд.
- Возможны разные вариации облицовки: стекломозаика, двухцветный пластик, бамбук, нержавеющая сталь.



Душ Виши Calipso TROPICANA

- Обеспечивает водный массаж как в режиме низкого давления, так и в режиме высокого давления в разбрызгивающей системе.
- Система включает в себя вертикальную колонну управления давлением и температурой душа и собственно душ.
- Душевая система (горизонтально расположенная труба с пятью головками, каждая из которых регулируется отдельно) расположена над пластиковой массажной кушеткой.
- Гигиеническая кушетка Vichu из пластика с боковыми сточными углублениями и сливным отверстием со стороны ног. В качестве альтернативы может быть поставлена кушетка Calipso RELAX.
- Дополнительно может быть установлен защитный экран от разбрызгивания. Также может быть установлен ополаскивающий душ для использования после грязевых или морских процедур.



Кушетка для SPA-процедур Calipso COMFORT

- Рабочей поверхностью служит обогреваемая эластичная мембрана. Она отделяет тело пациента от подогретой воды в ванне, плотно прижимается к телу, повторяя его форму и усиливая согревающий эффект. В течение всей процедуры тело не соприкасается с водой.
- Кушетка предназначена для профессиональных косметологических процедур по телу. Клиент наслаждается чувством «невесомости», укутанный теплом и слушая звуки музыки.
- Электромеханическая регулировка высоты. Ложe остается на неизменной высоте, ванна поднимается вверх, и подогретая вода, находящаяся под пленкой в ванне укутывает тело.
- Клиента укрывают термопокрывалом, состоящим из 2 -х частей. Различные варианты облицовки.



SPA-кушетка Calipso RELAX

- Кушетка для массажа и релаксации.
- Электромеханическая регулировка высоты ванны без использования воздухокомпрессора.
- Кушетка всегда остается на одной высоте, при поднятии ванны вверх подогретая вода под пленкой укутывает тело пациента.
- Термоодеяло для обертываний в комплекте.



- **Характеристики:**
 - Массажный модуль.
 - 20 массажных дюз.
 - Массажные струи движутся от бедер до плеч и обратно.
 - При помощи кнопки «стоп» процедура может быть остановлена в любой момент.
 - Возможны разные вариации облицовки.

Кушетка для водного сухого массажа Calipso MARE

- Массаж на «водной постели» - струя воды массирует тело пациента через пленку аналогично ручному массажу. Движения массажных форсунок управляются с помощью компьютерной программы.

- **Характеристики:**
 - Для массажа и релаксации. Используется в салонах красоты, а также в Wellness и фитнес-центрах.
 - Массаж давлением воды: клиент остается сухим, лежа на поверхности водяного ложа, имеющего приятную температуру.
 - Управление массажными поверхностями разделено на 6 зон и осуществляется струями воды, подаваемыми через 24 форсунки.
 - 3 режима интенсивности массажа.
 - Возможность выбора длительности массажа на выбранных участках тела.
 - Добавление собственных программ массажа.



- Различные варианты облицовки.

Фотоэпиляторы

HPLight

Фотоэпилятор для домашнего применения

HPLight – инновационный продукт из линейки приборов для домашнего применения

- HPLight – первый портативный фотоэпилятор, позволяющий проводить эффективные процедуры эпиляции в домашних условиях. Легкий, безопасный, безболезненный и простой в использовании аппарат позволяет в домашних условиях достигать профессиональных результатов.
- **Преимущества:**
 - Использование профессиональных технологий фотоэпиляции (IPL).
 - Высокая эффективность при максимальной компактности (вес всего 1,2 кг).
 - Экономичность: качественная фотоэпиляция значительно дешевле, чем в салонах красоты.
 - Удобство и простота в использовании – не требуется специальное обучение.
 - Большая даже для профессиональных систем площадь светового пятна (6 см²).
 - Отсутствие болевых ощущений.
 - Использование в удобной для Вас обстановке и в удобное для Вас время.
 - Подходит как для женщин, так и для мужчин.
- HPLight может применяться для удаления нежелательных волос на руках, ногах, в области подмышек, в зоне бикини, а также на лице вдоль линии подбородка, вокруг рта и на шее.



MS Westfalia GmbH. О компании

MS Westfalia GmbH (осн. 1995, Тройсдорф, Германия) - сертифицированный (ISO-9001, ISO-13485) производитель широкого спектра медицинского оборудования, в том числе чистых помещений, стационарного и мобильного рентгеновского, ЛОР, офтальмологического и других видов оборудования.

MS Westfalia GmbH - поставщик медицинского оборудования полного цикла:

- Комплексное проектирование. Создание и ведение проектов, включающих полный спектр медицинского оборудования.
- Собственная служба сервиса. Наличие склада запчастей.
- Собственная служба логистики. Наличие полного спектра продукции на складе, возможность поставки на условиях EXW, FOB, CIF, DDP.
- Возможность гибкой системы оплаты, в том числе с использованием кредитных схем и банковских гарантий.
- Богатый опыт экспертного комплексного оснащения медицинских учреждений различного профиля.



Штаб-квартира MS Westfalia GmbH
Тройсдорф (Германия)

Оборудование производства MS Westfalia GmbH



Чистые помещения



Рентгеновское оборудование



ЛОР-оборудование



Оборудование для анестезиологии и интенсивной терапии



Медицинские светильники



Функциональная диагностика



Офтальмологическое оборудование



Микроскопы и кольпоскопы



Электрохирургия



Литотриптеры



Косметологическое и SPA-оборудование



Физиотерапевтическое оборудование



Домашние фотоэпиляторы



Центральный офис
(Германия)

Junkersring, 54
D-53844 Troisdorf
Telephone: +49 (2241) 944-93-3
Telefax: +49 (2241) 944-93-59
E-mail: info@mswestfalia.com

Представительство
в России

115114, г. Москва,
ул. Дербеневская, 1/2
Тел.: +7 (495) 544-54-53
Факс: +7 (495) 988-91-84
E-mail: rus@mswestfalia.com

MS Westfalia GmbH
www.mswestfalia.com